

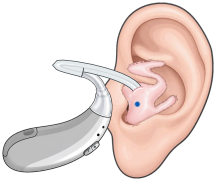
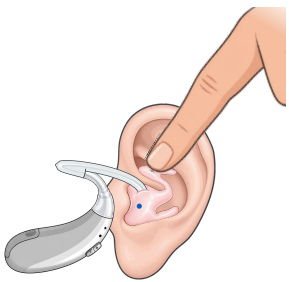
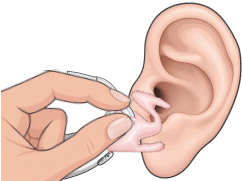
HdO-Hörgeräte mit Schlauch reinigen

Gerät hinter dem Ohr, ein Schlauch führt zum Ohrpasstück (Otoplastik) im Ohr.

Für Höreräteträger, Angehörige und Pflegekräfte. Bewahren Sie die Anleitung griffbereit auf, zum Beispiel beim Etui oder bei der Ladestation.

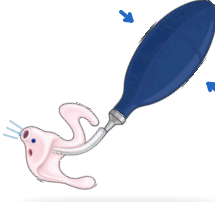
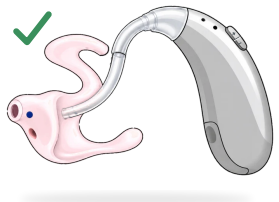


Einsetzen und Herausnehmen

 <p>1 Gehörgangsteil zuerst in den Gehörgang führen</p>	 <p>2 Oberen Teil in die Mulde drücken</p>	 <p>3 Gerät über das Ohr nach hinten legen</p>	 <p>4 Herausnehmen: Gerät nach vorn, Schlauch am Ohrpasstück greifen, herausziehen</p>
---	--	---	--

Rot = rechts, Blau = links. Die farbige Markierung finden Sie am Hörgerät und auf dem Ohrpasstück.

Ohrpasstück (Otoplastik) gründlich reinigen

 <p>1 Schlauch vom Hörwinkel abziehen – das Gerät bleibt trocken</p>	 <p>2 Erst die Tablette, dann das Ohrpasstück ins lauwarme Wasser</p>	 <p>3 Puster aufstecken, Ball kräftig drücken</p>	 <p>4 Ganz trocken wieder aufstecken</p>
--	---	--	--

Wichtig: In den Becher kommt nur das Ohrpasstück mit dem Schlauch. Niemals das Hörgerät selbst oder andere Teile mit Elektronik – sie gehen im Wasser kaputt.

Jeden Tag

- ✓ Ohrpasstück und Gerät mit einem Reinigungstuch abwischen. Die Öffnung muss frei sein.
- ✓ Belüftungsbohrung (Vent) bei Bedarf mit der Ventbürste reinigen.
- ✓ Mikrofone mit der Reinigungsbürste säubern.

Wann wechseln?

- ✓ **Schlauch:** wenn er gelb, hart oder brüchig wird, meist alle 3 bis 6 Monate. Das machen wir im Fachgeschäft.
- ✓ Wasser im Schlauch? Abziehen, auspusten, ganz trocknen lassen.

Batterie wechseln



1 Schutzfolie abziehen



2 30 Sekunden warten



3 Lade aufklappen, Batterie mit „+“ zur Markierung einlegen



4 Lade zuklappen – das Gerät ist an

Akku laden



1 Hineinlegen: links zu Blau, rechts zu Rot



2 Deckel zu – Lämpchen blinken grün: lädt



3 Morgens leuchten sie grün: voll



4 Deckel öffnen, Hörgeräte herausnehmen

Der Tag mit Hörgeräten

Morgens

- ✓ Hörgeräte ansehen: Sind sie sauber? Sitzt das Schirmchen fest?
- ✓ Akkugerät aus der Ladestation nehmen. Beim Batteriegerät das Batteriefach schließen. Ist die Batterie leer, eine neue einsetzen.
- ✓ Auf die Seite achten: **rot = rechts, blau = links** (Markierung am Hörgerät).
- ✓ Hörgeräte einsetzen und nachfragen: „Hören Sie gut?“

Abends vor dem Schlafengehen

- ✓ Hörgeräte herausnehmen und mit einem Reinigungstuch abwischen.
- ✓ Akkugerät in die Ladestation legen, dann lädt es über Nacht.
- ✓ Beim Batteriegerät das Batteriefach öffnen und das Hörgerät ins Etui legen, in die Trockenbox oder in den Trockenbecher.

Einmal pro Woche

- ✓ Gründlich reinigen, so wie es für die Bauform gezeigt wird.
- ✓ Schirmchen, Filter und Schlauch ansehen. Sind sie verfärbt, hart oder verstopft, wechseln Sie sie oder bringen Sie die Hörgeräte zu uns.
- ✓ In der Trockenbox oder im Trockenbecher gründlich trocknen.

Wann kommen Sie zu uns?

- ✓ Das Hörgerät pfeift, obwohl es richtig sitzt.
 - ✓ Kein Ton, obwohl die Batterie neu oder der Akku geladen und der Filter sauber ist.

- ✓ Das Hörgerät ist beschädigt oder nass geworden.
 - ✓ Druckstellen oder Schmerzen im Ohr: bitte auch zum HNO-Arzt.

Auch ohne Beschwerden gern gesehen: Kommen Sie regelmäßig zum Hörgeräte-Check. Wir reinigen und prüfen Ihre Hörgeräte, machen einen neuen Hörtest und stellen die Hörgeräte bei Bedarf neu ein.

