

Im-Ohr-Hörgeräte reinigen (Instant Fit und nach Maß)

Die Technik sitzt in einer kleinen Schale im Ohr und ist deshalb empfindlich gegen Ohrenschmalz und Feuchtigkeit.




Für Hörgeräteträger, Angehörige und Pflegekräfte. Bewahren Sie die Anleitung griffbereit auf, zum Beispiel beim Etui oder bei der Ladestation.

Einsetzen und Herausnehmen



Rot = rechts, Blau = links. Die farbige Markierung finden Sie auf der Schale des Hörgeräts.

Cerumenfilter wechseln

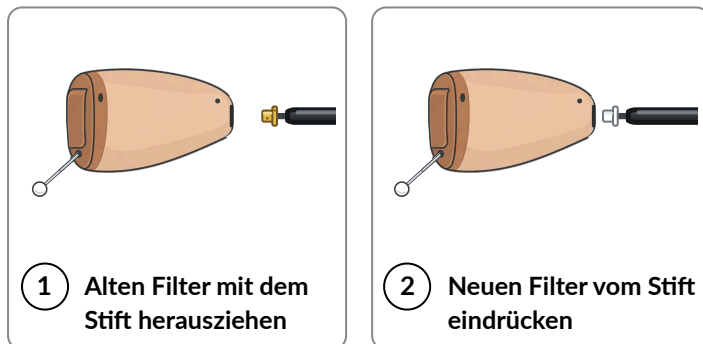


Jeden Tag

- ✓ Mit einem Reinigungstuch abwischen.
- ✓ Ohrenschmalz mit der Reinigungsbürste entfernen, von oben nach unten.
- ✓ Belüftungsbohrung (Vent) mit der Ventbürste freihalten.
- ✓ Kein Wasser, nicht in die Öffnungen sprühen.


Wann wechseln?

- ✓ **Cerumenfilter:** Richtwert alle 2 bis 3 Monate. Bei viel Ohrenschmalz etwa jeden Monat, spätestens wenn der Ton leiser wird.
- ✓ **Instant Fit:** Schirmchen oder Hülse etwa alle 3 Monate, bei viel Ohrenschmalz öfter.
- ✓ **Nach Maß:** Das Ohr verändert sich mit der Zeit. Pfeift oder drückt die Schale, kommen Sie vorbei.

Batterie wechseln

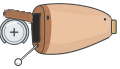

1 Im-Ohr:
Klappe
aufklappen,
Batterie mit
„+“ zur
Markierung
einsetzen

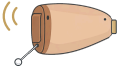

2 Klappe
zuklappen –
das Gerät
ist an

Akku laden



1 Hineinlegen:
links in L,
rechts in R



2 Deckel zu –
Lämpchen
blinken grün:
lädt



3 Morgens
leuchten sie
grün: voll



4 Deckel
öffnen,
Hörgeräte
heraus-
nehmen

Der Tag mit Hörgeräten

Morgens

- ✓ Hörgeräte ansehen: Sind sie sauber? Sitzt das Schirmchen fest?
- ✓ Akkugerät aus der Ladestation nehmen. Beim Batteriegerät das Batteriefach schließen. Ist die Batterie leer, eine neue einsetzen.
- ✓ Auf die Seite achten: **rot** = **rechts**, **blau** = **links** (Markierung am Hörgerät).
- ✓ Hörgeräte einsetzen und nachfragen: „Hören Sie gut?“

Abends vor dem Schlafengehen

- ✓ Hörgeräte herausnehmen und mit einem Reinigungstuch abwischen.
- ✓ Akkugerät in die Ladestation legen, dann lädt es über Nacht.
- ✓ Beim Batteriegerät das Batteriefach öffnen und das Hörgerät ins Etui legen, in die Trockenbox oder in den Trockenbecher.

Einmal pro Woche

- ✓ Gründlich reinigen, so wie es für die Bauform gezeigt wird.
- ✓ Schirmchen, Filter und Schlauch ansehen. Sind sie verfärbt, hart oder verstopft, wechseln Sie sie oder bringen Sie die Hörgeräte zu uns.
- ✓ In der Trockenbox oder im Trockenbecher gründlich trocknen.

Wann kommen Sie zu uns?

- ✓ Das Hörgerät pfeift, obwohl es richtig sitzt.
 - ✓ Kein Ton, obwohl die Batterie neu oder der Akku geladen und der Filter sauber ist.

- ✓ Das Hörgerät ist beschädigt oder nass geworden.
 - ✓ Druckstellen oder Schmerzen im Ohr: bitte auch zum HNO-Arzt.

Auch ohne Beschwerden gern gesehen: Kommen Sie regelmäßig zum Hörgeräte-Check. Wir reinigen und prüfen Ihre Hörgeräte, machen einen neuen Hörtest und stellen die Hörgeräte bei Bedarf neu ein.

