

RIC-Hörgeräte reinigen (Hörer im Ohr)

Gerät hinter dem Ohr, Hörer mit Schirmchen oder kleinem Ohrstück im Gehörgang.

Für Hörgeräteträger, Angehörige und Pflegekräfte. Bewahren Sie die Anleitung griffbereit auf, zum Beispiel beim Etui oder bei der Ladestation.



Einsetzen und Herausnehmen



● Links ● Rechts

① Seite prüfen: Blau = links, Rot = rechts



② Gerät hinter das Ohr legen



③ Hörer ins Ohr, Schirmchen kurz andrücken

Zum Herausnehmen das Kabel nah am Ohr fassen und den Hörer vorsichtig herausziehen.

Cerumenfilter und Schirmchen wechseln




① Schirmchen abziehen



② Alten Filter mit dem Stift herausziehen



③ Neuen Filter vom Stift eindrücken

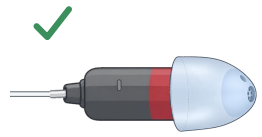

④ Schirmchen wieder fest aufstecken

Filter gerade herausziehen, nicht drehen. Der neue Filter steckt auf dem Stift. Das Schirmchen muss fest sitzen, sonst kann es im Ohr bleiben.

Jeden Tag

- ✓ Hörer und Schirmchen mit einem Reinigungstuch abwischen.
- ✓ Mikrofone und Filter mit der Reinigungsbürste säubern.
- ✓ Nachts in die Ladestation oder Trockenbox.

Wann wechseln?

- ✓ **Schirmchen:** Richtwert etwa alle 3 Monate. Bei viel Ohrenschmalz öfter, spätestens wenn es hart oder verfärbt ist.
- ✓ **Cerumenfilter:** Richtwert alle 2 bis 3 Monate. Bei viel Ohrenschmalz etwa jeden Monat, spätestens wenn der Ton leiser wird.

Batterie wechseln



1 Schutzfolie abziehen



2 30 Sekunden warten



3 Lade aufklappen, Batterie mit „+“ zur Markierung einlegen



4 Lade zuklappen – das Gerät ist an

Akku laden



1 Hineinlegen: links zu Blau, rechts zu Rot



2 Deckel zu – Lämpchen blinken grün: lädt



3 Morgens leuchten sie grün: voll



4 Deckel öffnen, Hörgeräte herausnehmen

Der Tag mit Hörgeräten

Morgens

- ✓ Hörgeräte ansehen: Sind sie sauber? Sitzt das Schirmchen fest?
- ✓ Akkugerät aus der Ladestation nehmen. Beim Batteriegerät das Batteriefach schließen. Ist die Batterie leer, eine neue einsetzen.
- ✓ Auf die Seite achten: **rot = rechts, blau = links** (Markierung am Hörgerät).
- ✓ Hörgeräte einsetzen und nachfragen: „Hören Sie gut?“

Abends vor dem Schlafengehen

- ✓ Hörgeräte herausnehmen und mit einem Reinigungstuch abwischen.
- ✓ Akkugerät in die Ladestation legen, dann lädt es über Nacht.
- ✓ Beim Batteriegerät das Batteriefach öffnen und das Hörgerät ins Etui legen, in die Trockenbox oder in den Trockenbecher.

Einmal pro Woche

- ✓ Gründlich reinigen, so wie es für die Bauform gezeigt wird.
- ✓ Schirmchen, Filter und Schlauch ansehen. Sind sie verfärbt, hart oder verstopft, wechseln Sie sie oder bringen Sie die Hörgeräte zu uns.
- ✓ In der Trockenbox oder im Trockenbecher gründlich trocknen.

Wann kommen Sie zu uns?

- ✓ Das Hörgerät pfeift, obwohl es richtig sitzt.
 - ✓ Kein Ton, obwohl die Batterie neu oder der Akku geladen und der Filter sauber ist.

- ✓ Das Hörgerät ist beschädigt oder nass geworden.
 - ✓ Druckstellen oder Schmerzen im Ohr: bitte auch zum HNO-Arzt.

Auch ohne Beschwerden gern gesehen: Kommen Sie regelmäßig zum Hörgeräte-Check. Wir reinigen und prüfen Ihre Hörgeräte, machen einen neuen Hörtest und stellen die Hörgeräte bei Bedarf neu ein.

